

tomedo API-Connector: Einrichtung für Arztpraxen



Diese Anleitung führt Sie in wenigen Schritten durch die Aktivierung des tomedo.API Connectors. Sie ist in einfacher Sprache gehalten und enthält nur das Nötige.

Voraussetzungen



- ✓ tomedo® ist auf die aktuelle Version (mind. Version 161) aktualisiert.
- ✓ Ein zollsoft-Konto ist vorhanden. Anleitung zur Konto-Anlage:
<https://support.tomedo.de/handbuch/tomedo/praxisverwaltung/#anlage-eines-zollsoft-kontos>



Schritt für Schritt


1. API Connector in tomedo® aktivieren

- ✓ ServerTools → tomedo.API Connector Modul aktivieren und installieren.
- ✓ Loggen Sie sich hier mit einem tomedo-Benutzer (Kürzel) mit Administrator-Rechten ein.

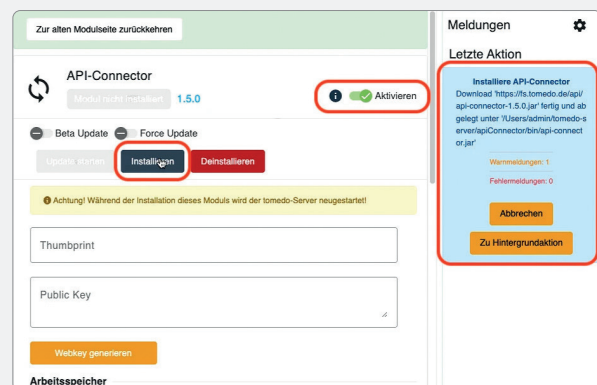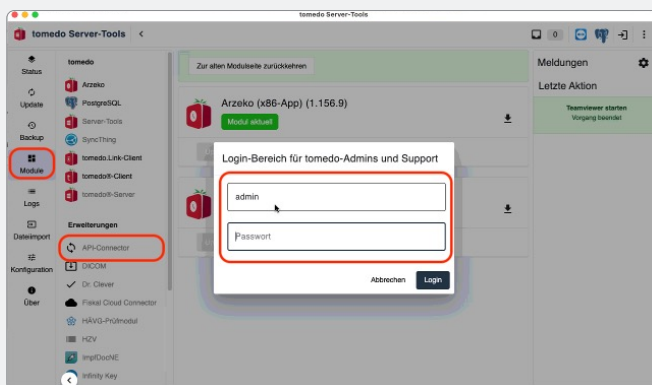

2. Im Admin-Portal anmelden

- ✓ <https://api.tomedo.de/admin> im Browser öffnen.
- ✓ Mit dem zollsoft-Konto der Praxis anmelden.

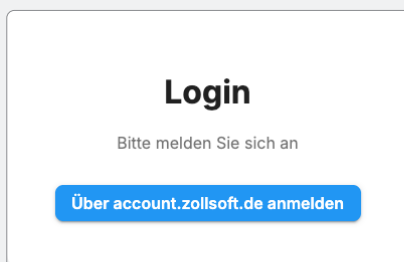

3. Server aktivieren und benennen

- ✓ Im Admin-Portal: Menü „Server“ → „Aktivieren“.
- ✓ „Server-Einstellungen“ öffnen und Praxisnamen als Server-Namen eintragen, speichern.

 test-server

VITAS tomedo-adapter
API-Dienst

BESCHREIBUNG
Terminbuchung über telefonassistent.de

LINKS
<https://www.telefonassistent.de>
<tomedo:///marktplatz#ca3a9f68-1136-4e06-8382-b62ce415be96>



Server-Einstellungen

Erweiterte Einstellungen

Server-Name*
Musterpraxis am Wall

Server-Beschreibung*

Thumbprint

ServerID
a5f08963-0b36-4067-aef1-6c095148e5e2

Abbrechen **Speichern**

4. Partner-Paket installieren

- ✓ Das Standard-Paket für den gewünschten Partner im Gateway installieren.

VITAS tomedo-adapter
API-Dienst

BESCHREIBUNG
Terminbuchung über telefonassistent.de

PARTNER-WEBSEITE
<https://www.telefonassistent.de>

TOMEDO-STANDARD-PAKET
<tomedo:///marktplatz#ca3a9f68-1136-4e06-8382-b62ce415be96>





tomedo.app öffnen?
Eine Website möchte diese Anwendung öffnen.

Abbrechen **tomedo.app öffnen**



Installation
Möchten Sie jetzt das Paket "tomedo.API Beta mit VITAS.ai" installieren?

Nein **Ja**



API-Patientenzugriffsrechte anpassen
 Hiermit können Sie für jeden Patienten einstellen, ob VITAS deren Daten erhalten darf oder nicht. Dies betrifft Patienten nur dann nicht, wenn bei diesen explizit die massenhafte Setzung der Zugriffsrechte deaktiviert wurde.
 Bitte stellen Sie vor der Vergabe des Zugriffs über diese Methode sicher, dass Ihre Datenschutzerklärung eine solche Aktion für alle Patienten erlaubt, für welche die massenhafte Setzung von Zugriffsrechten nicht gesondert deaktiviert wurde.

Das Setzen der Patientenzugriffsrechte erzeugt viel Serververkehr und sollte optimalerweise außerhalb der Betriebszeiten getätigt werden.

Zugriff auf alle Patienten erteilen

☒ Auswahl als Standard festlegen
☒ Partner aktivieren

Abbrechen **OK**

5. ServerID kopieren und beim Partner hinterlegen

- ✓ Die ServerID im Gateway (unter „Server-Einstellungen“) kopieren.
- ✓ Auf der Partner-Webseite anmelden und die ServerID dort einfügen.

Erweiterte Einstellungen

Server-Name*
Musterpraxis am Wall

Server-Beschreibung*

Thumbprint

ServerID
a5f08963-0b36-4067-aef1-6c095148e5e2

Abbrechen **Speichern**

VITAS tomedo-adapter
API-Dienst

BESCHREIBUNG
Terminbuchung über telefonassistent.de

PARTNER-WEBSEITE
<https://www.telefonassistent.de>

TOMEDO-STANDARD-PAKET
tomedo:///marktplatz#ca3a9f68-1136-4e06-8382-b62ce415be96



Hinweise

- ✓ Führen Sie die Schritte nach Möglichkeit am Praxis-Server aus.
- ✓ Stellen Sie sicher, dass Sie ausreichende Rechte für Installation und Aktivierung besitzen.
- ✓ Notieren Sie die ServerID für spätere Support-Anfragen.

Videoanleitung & Support

Zur Video-Anleitung (Quick-Support-Video): <https://www.youtube.com/watch?v=LTyUqrVMVRY>

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren IT-Dienstleister oder den tomedo/zollsoft-Support.

Nützlicher Startpunkt: <https://support.tomedo.de/>



Stand: 02/2026